

www.dagcanmedikal.com



Ev sađlık ve Mutlulukla Dolu

Dađcan Medikal


Tibbi Cihazlar Medikal Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Őirketi
adına VİGEN MEDİKAL tarafından üretilmiŐtir.

Adres: Güçlükaya Mah. Belören Sk. No:6/A (Keçiören Belediyesi Yanı) 06300 Keçiören - ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 360 54 64 • 360 54 68 • Faks: 360 54 56 www.dagcanmedikal.com • www.dagcanmedikal.net
E-mail: satis@dagcanmedikal.com • medikal@dagcanmedikal.com

KULLANIM KILAVUZU

Nano Silver Samcho

Hygiea taŐlı termal terapatik medikal minder

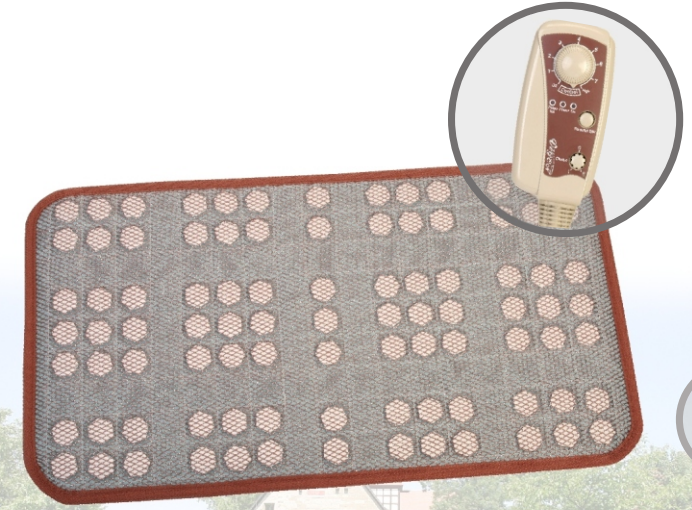

Ev sađlık ve Mutlulukla Dolu

Dađcan Medikal

Tibbi Cihazlar Medikal Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Őirketi
adına VİGEN MEDİKAL tarafından üretilmiŐtir.



Kullanmadan Önce Kullanım Klavuzunu Dikkatlice Okuyunuz.

■ Kullanım Öncesi Hazırlıklar

- 1 Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- 2 Bu ürün AC220V, 50/60 Hz içindir. Lütfen voltajı kontrol edin.
- 3 Kullanım sonrası ürün ile güç kablosunu birbirinden ayırın.

■ Nasıl Kullanılır?

- 1 Kontrol ünitesi ile şilteyi birbirine bağlayın.
 - 2 Güç kablosunu prize takın.
 - 3 Açma/Kapama düğmesine basın ve ışığın yandığından emin olun.
 - 4 İstenilen düzeyde ısı elde etmek için, ısı ayar düğmesini çevirin.
 - 5 Elektrik potansiyeli düğmesini açın.(1 saat)
 - 6 İşiniz bittikten sonra düğmeden kapatın ve fişi prizden çekin.
- ※ Azami çalışma süresi 8 saattir. 8 saatin sonunda ışık yanıp sönmeye başlar.

■ Kontrol Ünitesi



- 1 Isı kontrol düğmesi
- 2 Elektrik potansiyeli lambası
- 3 Güç lambası
- 4 Operasyon lambası
- 5 Elektrik potansiyeli Açma/Kapama düğmesi
- 6 Elektrik potansiyeli seçim düğmesi


■ Görünüm ve Yapı

a. Ürün Tasarımı

Bu elektrikli şilte HyGiEa taşlarıyla kaplı gümüş ipe örülü şilte ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Kan dolaşımını hızlandırırken, ağrıları yok eder. Ayrıca elektrik potansiyeli kullanarak hücrelerin yenilenmesini sağlar.

b. Temel Yapı

- (1) Cihazın temel yapısı aşağıdaki resimde tanımlanmıştır.

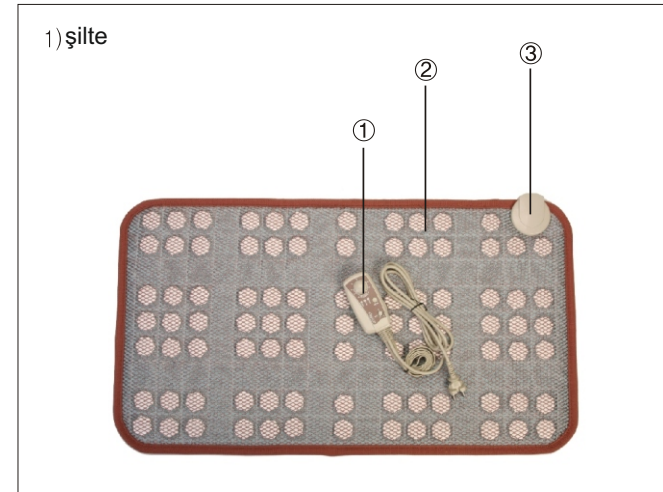

No	İsim	Fonksiyon
1	Kontrol ünitesi	Şiltenin termal ve elektrik potansiyeli fonksiyonlarını kontrol eder.
2	Şilte	Termal tedavi ve elektrik potansiyeli tedavisi için kullanılır.
3	Kontrol ünitesi bağlantısı	Şilte ile kontrol ünitesini birbirine bağlar.

■ Nasıl Saklanır?

- ① Fişi prizden çekin.
- ② Nemsiz, kuru bir ortamda saklayın.
- ③ Cihazı sudan uzak tutun.
- ④ Titreşimli ortamlardan ve darbelerden sakının.
- ⑤ Üzerine böcek ilacı sıkmayın. Elektronik parçalar zarar görebilir.

■ Uyarı

- ① Kısa devre oluşumuna ve yangına engel olmak için şilteyi bükmeyin, kontrol ünitesini darbeye maruz bırakmayın.
- ② Isı değişikliğini algılayamayan kişiler ürünü mutlaka gözetmen eşliğinde kullanmalıdırlar.
- ③ Keskin ya da sivri bir cisimle şilteyi delmeyin.
- ④ Üzerine sıvı dökülürse derhal kullanımı bırakın ve fişi prizden çekin. Kuru bir bezle iyice temizleyin. Tamamen kurulamadan yeniden kullanmayın.
- ⑤ Şilte yada güç kablosu hadar görürse elektrik çarpması veya yangın tehlikesi baş gösterebilir. Mutlaka teknik servise başvurun.
- ⑥ Kullanım sırasında kendinizi kötü hissederseniz kullanımı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.
- ⑦ Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun.

Güvenlik başvuru numarası: HH7820-6002A

Ürün adı: Elektrikli Şilte

Ürün modeli: Nano silver samcho

Voltaj: 220V, 50/60Hz, 120w

Üretici: Dağcan Medikal adına Vigen Medikal tarafından üretilmiştir.

Teknik servis: Dağcan Medikal

Adres: Güçlükaya mah.Belören sk.no:6/A Keçiören/Ankara/Türkiye

Garanti Belgesi

Ürün	Nano silver samcho	Ürün no	
Üretici	Vigen Medikal		
	Adres	282-1,sungdury,gongdoup ansungsi, gyeonggido	
Distribütör	Dağcan medikal		Satıcı
	Adres	Güçlükaya mah.Belören sk.no:6/A Keçiören/Ankara/Türkiye	0.312.360.54.64
Alıcı	İsim	Satın alma tarihi	
	Adres		tel

Teknik servise başvurabilmek için garanti belgesinde satıcının imzasının ve ürün numarasının bulunması şarttır.

Garanti dönemi, satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır. Eğer satın alma tarihi doldurulmamışsa, garanti dönemi ürünün depoya geliş tarihi itibarıyla başlamış sayılır.

Teknik servise başvurmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

Vigen ürünleri, tüketiciyi koruma yasaları kapsamında garanti edilmektedir.

Cihazla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, satıcınızla ya da teknik servisle temasa geçin.

Garanti Özellikleri

1. Garanti dönemi içerisinde ürün düzgün biçimde kullanılmışsa, teknik servis hizmeti ücretsiz olacaktır.
2. Garanti dönemi içinde dahi olsa aşağıdaki hallerde teknik servis hizmeti ücretlendirilecektir:
 - (1) Doğru voltajda kullanılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.
 - (2) Uygun elektrik bağlantısının yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.
 - (3) Tüketicinin kendi kendine cihazı tamire ya da üzerinde değişiklik yapmaya kalkışması durumunda
 - (4) Değiştirilebilir parçaların değişim sürelerini aşmaları durumunda
 - (5) Hasarın doğal bir afet nedeniyle meydana gelmesi durumunda.
 - (6) Cihazın teknik servis dışında başkaları tarafından tamir edilmiş olması durumunda.

Hatırlatma Notu

1. Teknik servise başvurmanız halinde lütfen garanti belgesini getirin.
2. Garanti belgesinin yeniden verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle belgeyi iyi muhafaza edin.
3. Bu belge sadece distribütörün ülkesi sınırları içinde geçerlidir.
4. Yasal olmayan satış kanallarını engellemek için, garanti belgesi bulunmayan ürünlere teknik servis hizmeti verilmeyecektir.

Ürün kalitesinin artırılması amacıyla, kılavuzda yazılı olan ürün özellikleri herhangi bir uyarı olmaksızın değiştirilebilir.